

Distribué par



Compat[®]

*Les Soins aux Patients.
Notre Priorité.*



Pour plus d'informations sur nos produits

**DISPOSITIFS MÉDICAUX
DE NUTRITION ENTÉRALE**

◆ Pompe de Nutrition Entérale et Accessoires



COMPAT ELLA® :
UNE POMPE
PORTABLE
FACILE
D'UTILISATION



- > **Ergonomique**: 14 × 14 cm et < 500 g
- > **Autonomie** de 24h à 125 mL/h
- > **Sécurité**: Précision du débit de +/- 5%
- > **Clavier Intuitif** permettant facilement d'identifier les fonctionnalités des boutons
- > **Large Écran en Couleur** affichant des messages clairs et permettant d'identifier facilement le statut de la pompe et de résoudre les alarmes
- > **Pour s'Adapter aux Attentes des Soignants et Aidants**:
 - Deux modes de nutrition: Continu et intervalle
 - Possibilité de désactiver l'alarme fin de dose et de mettre en veille l'écran
 - Pour aider au suivi de la nutrition entérale: Historique des doses des 30 derniers jours
- > **Maintenance**: Tous les 5 ans

Désignation	Code de commande : EAN	Unité de vente/carton
Pompe Compat Ella®	7613 036471152	1
Compat Ella® Sac à Dos	7613035210127	1
Compat Ella® Support Sac à Dos	7613035210134	1

● Tubulures et Tubulures avec Poche



TUBULURES
AVEC POCHE
1.5 L



- > **Sécurité:** Tubulures Compat® et Compat Ella® avec connecteurs ENFit® (norme ISO 80369-3) et connecteur ENPlus (norme ISO 18250-3) conçus pour être incompatibles IV et promouvoir la sécurité du patient en évitant les connexions involontaires
- > **Compatibilité avec:**
 - Poche/contenant de nutrition avec connecteur ENPlus
 - Sonde de nutrition entérale avec connecteur ENFit®
 - Seringue avec connecteur ENFit®

Compat® Flexibaggle®

RÉSERVOIR
VIDE 1.5 L



Compat® Gravity

TUBULURE
GRAVITÉ
SIMPLE VOIE



Matériaux sûrs : Stériles et exempts de DEHP, de BPA et de latex*

Dispositif médical destiné à la nutrition entérale marqué CE (0123).
Gamme Compat Ella®: Classe IIa. Compat® Gravity et Compat® Flexibaggle®: classe Is. Fabricant légal: Cedic Srl.

Compat ella®

Compat® Flexibaggle

Compat® Gravity

● Accessoires, Tubulures

Désignation	Code de commande : EAN	Unité de vente/carton
Compat Ella® Tubulure 1 Voie	7613035474949	30
Compat Ella® Tubulure 2 Voies	7613035459434	
Compat Ella® Tubulure Réservoir 1.5L	7613035474826	
Compat® Gravity Tubulure Simple Voie	7613035475021	
Compat® Flexibaggle® Poche Vide 1.5 L	7613035599819	

◆ Boutons de Gastrostomie à Ballonnet

DISPONIBLE
EN KIT
POUR FACILITER LE
PLACEMENT



- > **Gamme Complète:** 89 références pour répondre à la plupart des exigences cliniques
- > **Confort du Patient:** Forme ergonomique arrondie, ballonnet en silicone biocompatible et extrémité distale entièrement recouverte
- > **Facilité d'Utilisation:**
 - Disponible sous forme de kit pratique avec mandrin et sachet de gel lubrifiant pour faciliter la pose
 - Bouchon de fermeture avec indication de la taille (12 à 24FR) et de la longueur (0.8 à 6.5 cm) du bouton
 - Valve de gonflage avec indication du volume du ballonnet (3 à 8 mL)
 - Traçabilité améliorée avec deux étiquettes détachables


Matériaux surs : Stériles et exempts de DEHP, de BPA et de latex*

Dispositif médical destiné à la nutrition entérale de classe IIb marqué CE (0123). Fabricant légal: Degania Silicone LTD.

Longueur stomie (cm)	Code de commande: EAN								Code LPP*
	12FR	14FR	16FR	18FR	20FR	24FR			
0.8	7613287225764	7613287239976	7613287241696	7613287243775	7613287244512	7613287245687			
1.0	7613287226303	7613287240507	7613287242129	7613287243812	7613287244550	7613287245816			
1.2	7613287226341	7613287240538	7613287242150	7613287243850	7613287244840	7613287245847			
1.5	7613287148025	7613287148070	7613287242181	7613287243881	7613287244888	7613287245878			
1.7	7613287226389	7613287148209	7613287148490	7613287244116	7613287244918	7613287246004			
2.0	7613287226525	7613287148254	7613287148926	7613287244147	7613287244949	7613287246035			
2.3	7613287226556	7613287240569	7613287242310	7613287244178	7613287245007	7613287246073			
2.5	7613287226716	7613287148353	7613287148940	7613287244208	7613287245038	7613287246103			
2.7	7613287226747	7613287240590	7613287242341	7613287244239	7613287245083	7613287246134			6110965
3.0	7613287226778	7613287240729	7613287148971	7613287244260	7613287245335	7613287246165			
3.5	7613287226808	7613287148384	7613287242402	7613287244291	7613287245366	7613287246196			
4.0	7613287226839	7613287241405	7613287242433	7613287244321	7613287245397	7613287246424			
4.5	7613287226860	7613287241443	7613287242464	7613287244390	7613287245625	7613287246455			
5.0	7613287226921	7613287241474	7613287242495	7613287244420	7613287245656	7613287246486			
5.5		7613287241603		7613287244451					
6.0		7613287241634		7613287244482					
6.5		7613287241665							

*Tarif LPP (Liste des Produits et Prestations Remboursables par l'Assurance Maladie) TTC: 243,92 € (Avis de fixation des tarifs paru au JO du 17 novembre 2009).
Vendu à l'unité.

◆ Prolongateurs pour Boutons de Gastrostomie

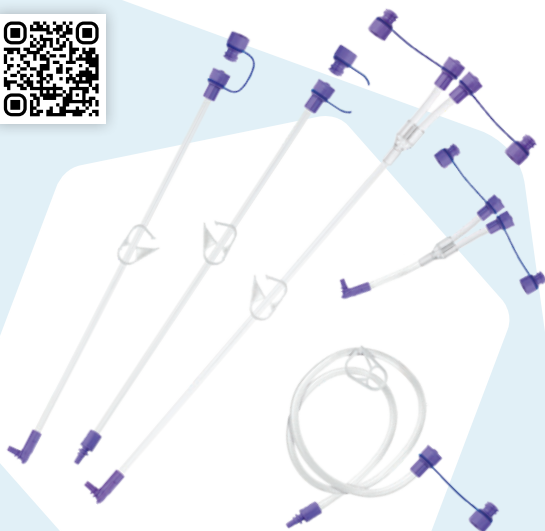

- > **Nombreuses Tailles et Caractéristiques:** Raccord coudé pour l'alimentation continue et raccord droit pour l'alimentation par bolus de différentes tailles (5, 30 et 60 cm) avec ou sans port de médication
- > **Facilité d'Utilisation:**
 - Double connecteurs pour faciliter l'administration de médicaments
 - Bouchon à vis et clamp de fermeture (sauf pour le prolongateur 5 cm) pour prévenir le risque de fuites de liquides et faciliter les manipulations
- > **Sécurité:** Compatibles uniquement avec les tubulures d'administration et les seringues ENFit[®] (norme ISO 80369-3) et incompatibles IV

Matériaux sûrs : Stériles et exempts de DEHP, de BPA et de latex*

Dispositif médical destiné à la nutrition entérale marqué CE (0123) de classe IIa. Fabricant légal : Cedic Srl.

● Prolongateurs de Bouton de Gastrostomie

Désignation	Connecteur Bouton	Connecteur ENFit [®]	Longueur (cm)	Code de commande : EAN	Unité de vente/carton	Code LPP*
Compat [®] Buddy Prolongateurs pour Bouton de Gastrostomie	Coudé	Double	5	7613287391513	10	6110860
	Coudé	Double	30	7613287391766		
	Coudé	Double	60	7613287392015		
	Coudé	Simple	30	7613287391957		
	Coudé	Simple	60	7613287392053		
	Droit	Simple	30	7613287391988		
	Droit	Simple	60	7613287392084		

*Tarif LPP TTC: 11,43€ (Avis de fixation des tarifs paru au JO du 17 novembre 2009).

◆ Dispositif de Mesure de Stomie



- **Confort du Patient:** Permet de déterminer la profondeur de la stomie afin de sélectionner la longueur adaptée du bouton de gastrostomie Compat[®] Buddy pour réduire le risque de fuites gastriques et d'irritation de la peau
- **Aperçu des Caractéristiques :**
 - Tube de charrière 12FR avec échelle graduée tous les centimètres et repères tous les 0.25 cm
 - Ballonnet de rétention en silicone de 5 mL



PERMET
DE DÉTERMINER
LA LONGUEUR
DE LA STOMIE

Matériaux sûrs : Stériles et exempts de DEHP, de BPA et de latex*

Dispositif médical destiné à la nutrition entérale marqué CE (0123) de classe Is. Fabricant légal: Degania Silicone LTD.

Désignation	Code de commande : EAN	Unité de vente/carton
Compat [®] Buddy Dispositif de Mesure pour Stomie	7613287159519	2

Compat[®] Gastrotube

◆ Sondes de Gastrostomie à Ballonnet



- > **Gamme:** Large choix de tailles (12/14/16/18/20/22/24FR) et de volumes de ballonnet (5, 10 et 15 cc)
- > **Facilité d'Utilisation:** Port de médication ENFit[®] pour faciliter l'administration des médicaments et emballage individuel stérile
- > **Confort du Patient:**
 - Disque de rétention en silicone avec orifices d'aération et pieds surélevés permettant à l'air de circuler autour de la stomie
 - En silicone souple transparent et biocompatible avec extrémité distale entièrement recouverte par le ballonnet
- > **Sécurité du Patient:**
 - Connecteur ENFit[®]
 - Exempts de DEHP, de BPA et de latex*










Matériaux sûrs : Stériles et exempts de DEHP, de BPA et de latex*

Dispositif médical destiné à la nutrition entérale de classe IIb marqué CE (0123).
Fabricant légal : Degania Silicone LTD.

Compat® Gastrotube

● Sondes de Gastrostomie à Ballonnet

Désignation	Couleur de la valve	Code de commande : EAN	Unité de vente/carton	Code LPP*
Compat® Gastrotube 12FR		7613287489852	1	6188660
Compat® Gastrotube 14FR		7613035356993		
Compat® Gastrotube 16FR		7613035358805		
Compat® Gastrotube 18FR		7613035357198		
Compat® Gastrotube 20FR		7613035357181		
Compat® Gastrotube 22FR		7613035357174		
Compat® Gastrotube 24FR		7613035357167		

*Tarif LPP TTC: 39,51€ (Avis paru au JO du 21 octobre 2016).

Compat® DualPort

◆ Sonde Nasogastrique à Simple Lumière et Double Connecteurs pour le Drainage et la Nutrition Entérale



- > Sonde pour permettre la nutrition et le drainage intermittent du contenu gastrique au moyen d'une seule sonde et aider à réduire le nombre de manipulations

> **Aperçu des Caractéristiques :**

- Sonde 14FR, 120 cm radio-opaque, en polyuréthane souple pour le confort patient
- Avec un connecteur ENFit® pour l'administration entérale et un connecteur godet pour faciliter le drainage gastrique, compatible avec la majorité des dispositifs de drainage
- Exempt de DEHP, BPA et de latex*



UN MANDRIN
PRÉ-LUBRIFIÉ EN CIRCUIT
OUVERT POUR FACILITER
LA POSE

Compat® DualPort

- Sonde Nasogastrique à Simple Lumière et Double Connecteurs pour le Drainage et la Nutrition Entérale

Désignation	Code de commande : EAN	Unité de vente/carton
Compat® DualPort 14FR 120cm	7613036830409	20

Compat® StayPut

◆ Sonde de Nutrition Nasojéjunale à Double Lumière avec Drainage Gastrique Intégré



SONDE GASTRIQUE:

18FR/120CM


SONDE JÉJUNALE:

9FR/165 CM



- > Sonde en polyuréthane pour la nutrition entérale et le drainage gastrique¹ simultanée
- > **Pose:** Peropératoire, endoscopique ou radiologique. Les deux sondes disposent d'une extrémité distale entièrement radio-opaque pour confirmer la position de la sonde
- > **Facilité d'Utilisation:**
 - Repères d'insertion tous les 5 cm pour la sonde 18FR pour évaluer la profondeur d'insertion et vérifier la migration de la sonde
 - Un mandrin lubrifié en circuit ouvert pour la sonde 9FR pour faciliter l'insertion de la sonde
 - Le connecteur godet de la sonde d'aspiration gastrique est compatible avec la majorité des dispositifs d'aspiration

AVEC EMBOUT
ANTENNE POUR
FACILITER LA
MANIPULATION
ENDOSCOPIQUE

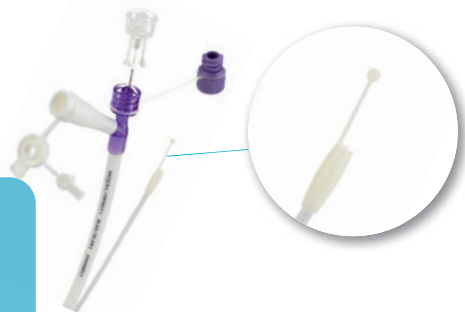

Exempt de DEHP, BPA et de latex*

¹Le drainage intermittent ne doit pas dépasser 120 mmHg. L'aspiration continue ne doit pas dépasser 60 mmHg (consulter la notice d'instructions).

Dispositif médical destiné à la nutrition entérale et au drainage de classe IIa marqué CE (0123). Fabricant légal: Cedic Srl.

Compat® StayPut

● Sonde de Nutrition Nasojéjunale à Double
Lumière avec Drainage Gastrique Intégré

Désignation	Code de commande: EAN	Unité de vente/carton
Compat® StayPut 9/18FR 165/120 cm	7613036651202	1

Compat[®] ENject

◆ Seringues entérales Enfit



> Facilité d'utilisation :

- Le piston glisse facilement dans le corps de la seringue,
- Le capuchon évite les fuites et permet de préparer les solutions nutritives ou médicaments à l'avance.

> Sécurité des patients :

- Administration simple et précise,
- Embouts ENFIT[®] incompatibles avec la voie veineuse.


> Sécurité des matériaux :

- Stérile,
- Sans DEHP,
- Sans BPA,
- Sans latex

> Compatibilité :

- Sondes d'alimentation entérale ENFIT[®]
- Ports pour l'administration de médicaments ENFIT[®]

- A Corps transparent gradué
- B Piston violet
- C Seringues 1 ml à 20 ml : embout ENFit
- D Seringues 50-60 ml : embout ENFit
- E Capuchon ENFit

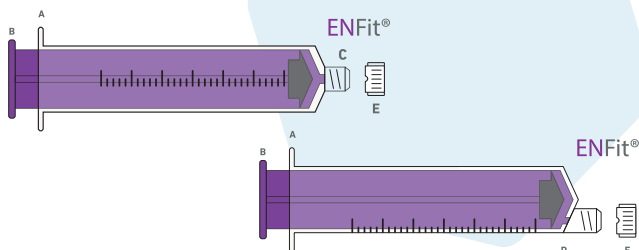

Dispositif Medical destiné à la nutrition entérale de classe Is marqué CE (0197). Fabricant légal : Jiangsu Micsafe Medical Technology Co.

Compat® ENject

Description	Référence	Quantité/carton
Seringue EnFit® 60ml	105844	30
Seringue EnFit® 20ml	105845	50
Seringue EnFit® 10ml	105846	100
Seringue EnFit® 5ml	105847	100
Seringue EnFit® 3ml	105843	100
Seringue EnFit® 1ml	105848	100

Compat® Curae

◆ Une gamme sur-mesure de nécessaires de soins en nutrition



> **Innovation** : Les nécessaires de soins Compat® Curae ont été développés pour permettre **des soins de nutrition aux patients** :

- Avec ou sans pansements techniques
- Seringues ENFit®
- Sparadraps hypoallergéniques
- Systèmes de fixation pour sonde
- Ciseaux stériles
- Etiquette de traçabilité

> **Évolutive** : Une gamme de nécessaires de soins permettant de couvrir la plupart des besoins cliniques et respectant au mieux les recommandations des sociétés savantes.

> **Praticité** : Chaque nécessaire de soins contient 10 soins infirmiers complets.

> **Confort du Patient** : Les pansements hydrocellulaire non découpé permet la douche et des changements de pansement moins douloureux.
Le sparadraps non-tissé est hypoallergénique.

> **Conception Française** : Les nécessaires de soins Compat® Curae sont assemblés à Toulouse.

Désignation		Soins Gastro-Jéjunostomie							
		Pansement Hydrocellulaire			Pansement Sec			Sans Pansement	
		Premium	Premium	Premium	Classic+	Classic	Basic+	Basic	
Référence	Code LPP individuel	CNE001*	CNE001-7*	CNE001-9*	CNE001-2*	CNE001-4*	CNE001-6*	CNE001-8	
Pansement hydrocellulaire, boîte de 10	6399977	1	1	1	-	-	-	-	-
Pansement avec compresse absorbante 15x10cm	6399776	-	-	-	-	10	-	-	-
Pansement avec compresse absorbante 20x10cm	6357855	-	-	-	10	-	-	-	-
Pansement en polyuréthane transparent 20x15cm	6322271	-	-	-	10	10	10	-	-
Compresse NT 10x10cm, boîte de 50	6397435	1	1	1	1	1	1	1	1
Sérum physiologique (5 ou 10mL)		10 (10mL)	10 (10mL)	10 (10mL)	10 (5mL)	10 (5mL)	10 (5mL)	10 (5mL)	10 (5mL)
Sparadraps non tissés hypoallergéniques (HPA)	6339277	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*
Ciseaux stériles		1	1	1	-	-	-	-	-
Seringues ENFit®		5x60mL	8x60mL	5x20mL 5x10mL 5x5mL 1x1mL	8x60mL	8x60mL	8x60mL	8x60mL	8x60mL
Seringue 20mL, embout luer centré		1	1	1	-	-	-	-	-
Gants latex		-	10	10	-	-	-	-	-

Désignation		Soins SNG Adulte		Soins SNG Pédiatrique	
Référence	Code LPP individuel	CNE002	CNE002-2	CNE003	CNE003-2
Pansement hydrocolloïde, boîte de 10	6394336	1	1	1	1
Pansement film avec cadre de pose 10x12cm	6362460	10	10	10	10
Compresse NT 10x10cm, boîte de 25	6386532	1	1	1	1
Sérum physiologique (5 ou 10mL)		10 (5mL)	10 (5mL)	10 (5mL)	10 (5mL)
Sparadraps non tissés hypoallergéniques (HPA)	6339277	1*	1*	1*	1*
Systèmes de fixation pour SNG adulte ou pédiatrique		2	10	2	2
Sondes NG en PU Compat® CH6 90cm / CH8 120cm	6132910	-	-	1CH6 + 1CH8	-
Ciseaux stériles		1	1	1	1
Tampons d'alcool		10	10	10	10
Gel lubrifiant 5g		2	2	2	2
Seringues ENFit®		5x60mL	8x60mL	5x10mL 5x5mL	5x10mL 5x5mL

● SERVICES EN LIGNE



● Centre de formation

www.compatella.com



● Portail SAV

www.compatellaservicing.com

Révision et réparation ✓
Commande de pièces détachées ✓
Questions techniques ✓
servicing@compat.com



● Vidéos de formation

www.compatbuddy.fr

Vidéos conformes aux
recommandations
des fiches de bon usage
d'EURO-PHARMAT*



* <https://www.euro-pharmat.com/nutrition-enterale>

À PROPOS D'HEMODIA

Hemodia est une entreprise française, fondée en 1985 et basée à Toulouse, **experte dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux à usage unique**. Ses activités couvrent les sets de soins, l'arthroscopie, la plasturgie médicale ainsi que la nutrition entérale.

Forte d'environ 500 collaborateurs, Hemodia se distingue par son **exigence de qualité, sa réactivité** face aux besoins spécifiques des professionnels de santé et **son savoir-faire reconnu** dans le domaine médical.

Engagée dans une démarche d'innovation et de responsabilité sociétale, l'entreprise est **certifiée Ecovadis Bronze** pour ses performances en matière de développement durable.

Faire confiance à Hemodia, c'est choisir un savoir-faire sûr et une expertise reconnue.



Pour plus d'informations, contactez :



Hemodia SAS

85 rue du Chêne vert
31670 Labège - France

infocompat@hemodia.com

Avant toute utilisation lire attentivement la notice d'instructions. Le DEHP et le BPA ne sont pas ajoutés intentionnellement au cours du processus de fabrication. Non formulé avec du latex de caoutchouc naturel.

Document destiné exclusivement aux professionnels de santé. Ce document est la propriété d'Hemodia ; il ne doit pas être copié.