

AQUA VISION[®]

Pompe de gestion des fluides dédiée à l'arthroscopie



Épaule



Genou



Petites articulations



Hanche



hemodia
Medical Partner




AQUA VISION®

La pompe de gestion des fluides et son interface shaver intégrée

La pompe AQUA VISION® est utilisée au cours d'interventions d'arthroscopie par des chirurgiens orthopédiques et des infirmiers IBODE.

- Une pompe et ses accessoires développés en collaboration avec des chirurgiens
- Une utilisation simple et conviviale qui permet une maîtrise rapide de l'appareil
- L'interface shaver intégrée (ISI), qui permet l'utilisation de multiples types de shavers du marché

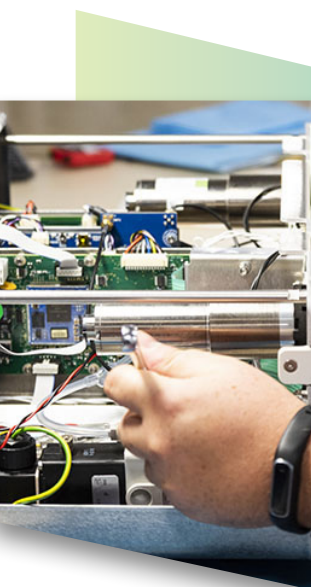

L'expérience Hemodia

Un savoir-faire reconnu dans le monde entier

- Hemodia a développé une expertise de pointe dans le management des fluides, tant pour les pompes que pour les tubulures
- Son savoir-faire reconnu apporte des solutions en matière d'équipements, de consommables et de maintenance des pompes
- Toutes les pompes AQUAVISION® sont assemblées dans notre atelier à Toulouse.



Adoptez nos produits et services



Qualité

Hemodia fabrique avec un souci constant d'amélioration de ses produits et dans le respect des normes.



Fiabilité

Hemodia s'appuie sur un processus entièrement internalisé et dispose de plusieurs sites de production intégrés.



Service client

Le service client et les équipes commerciales Hemodia sont à vos côtés sur le terrain pour répondre à vos attentes.

Des tubulures adaptées à la pompe

Nos produits



Tubulure d'irrigation journalière

Le dispositif à usage journalier permet de délivrer le liquide d'irrigation de la poche vers la tubulure d'irrigation intermédiaire.



Tubulure d'irrigation intermédiaire

Ce dispositif est destiné à acheminer le liquide d'irrigation de la tubulure d'irrigation journalière vers l'arthroscope.



Tubulure d'aspiration

Ce dispositif est utilisé pour aspirer le fluide dans l'articulation via une canule ou un shaver (rasoir).

Connexion des tubulures sur la pompe AQUA VISION®

La pompe est conçue pour répondre parfaitement aux demandes des IBODE, grâce à cela l'installation est :




Simple



Intuitive



Sécurisé

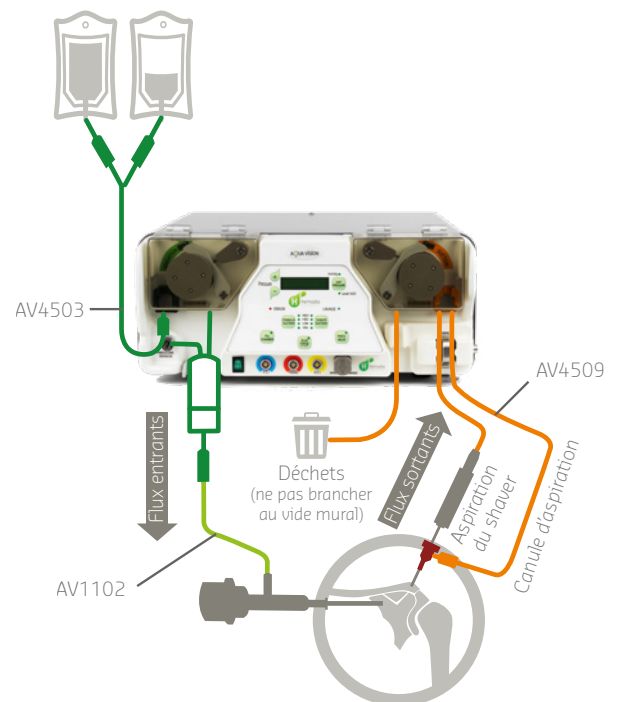

Interfaces

- **L'Interface Shaver Intégrée (ISI), l'interface shaver pince** fonctionne avec toutes les marques. La pompe détecte le fonctionnement de la pièce à main et ajuste automatiquement l'aspiration shaver/canule
- **L'interface pédale** fonctionne avec les marques Smith & Nephew®, ConMed®, Arthrex®, Eberle® et Karl Storz®



À propos d'Hemodia

Depuis sa création en 1985, Hemodia développe un savoir-faire de pointe en matière de dispositifs médicaux. Avec la mise sur le marché en 2016 de sa pompe AQUA VISION®, Hemodia relève haut la main le défi technologique en misant continuellement sur l'innovation, et accentue en permanence son implication en recherche et développement.

Fort de son concept industriel historique – internalisation de la conception, de la production, du stockage, de la maintenance et de la distribution – Hemodia anticipe les besoins de ses clients et répond aux impératifs de livraison à réception des commandes. Ses unités intégrées lui assurent un contrôle total sur l'approvisionnement et les équipements.

Grâce à son système de management de la qualité et à son haut niveau d'exigence, Hemodia garantit aux professionnels et aux patients d'être entourés d'un matériel de qualité. Faire confiance à Hemodia, c'est choisir un savoir-faire sûr et une expertise reconnue.

Spécificités techniques

Équipements

Référence	Description
ARTH-PUMP-A	Pompe d'arthroscopie AQUA VISION®
ARTH-PED2-A	Pédale 2 voies
ARTH-PED4-A	Pédale 4 voies
ARTH-ISHAU	Interface shaver pince
ARTH-FCI01	Interface pédale pour les consoles shaver Smith & Nephew / Dyonics
ARTH-FCI02	Interface pédale pour les consoles shaver ConMed / Linvatec
ARTH-FCI03	Interface pédale pour les consoles shaver Arthrex
ARTH-FCI05	Interface pédale pour les consoles shaver Karl Storz
103773	Cordon secteur pour l'Europe
103822	Cordon secteur pour le Royaume-Uni
103899	Cordon secteur pour la Suisse
104270	Cordon secteur pour le Canada
103777	Valise de transport noire

Consommables

Référence	Description	Unités par carton
AV4503	Tubulure d'irrigation journalière	30
AV4509	Tubulure set patient avec valve anti-retour	30
AV1102	Tubulure d'irrigation intermédiaire avec valve anti-retour	50



Pour plus d'informations, contacter :

Service client

+33 (0)5 61 00 71 81
customer.support@hemodia.com

Hemodia UK Ltd

11 Old Jewry, 8th Floor
London EC2R 8DU - UK

Votre représentant local



 **Hemodia SAS France**
85 rue du Chêne vert
31670 Labège - France



Consommables et pompe de classe IIa - Autres équipements de classe I (à l'exception de la valise de transport).
Merci de lire attentivement les instructions d'utilisation accompagnant ces dispositifs médicaux avant leur utilisation.

